


Catéteres venosos de media y larga duración: PICCs y Líneas medias

Catéter central de inserción periférica (PICC)

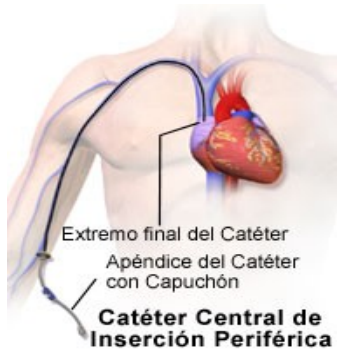

LOCALIZACIÓN CENTRAL:

Permanencia ≥ 1 año

Tolera:


- Todos los pH
- Todas las osmolaridades

USOS:

- Todo tipo de soluciones i.v.
- Hemoderivados.
- Extracción sanguínea (*)
- Monitorización de PVC (**)

(*) Detener las infusiones unos minutos antes
(**) Sólo catéteres de punta abierta

Línea media o midline (LM)

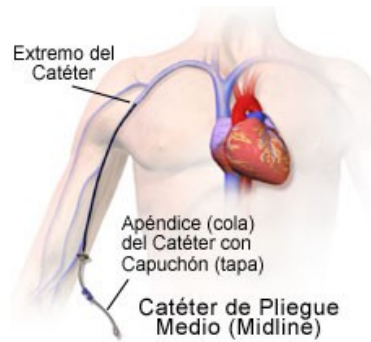

LOCALIZACIÓN PERIFÉRICA

Permanencia hasta 1 mes

Tolera:

- pH entre 5 y 9
- osmolaridad <600
<900 **SÓLO NPP***

USOS:

- Medicación de uso periférico: Sueroterapia, antibioterapia, analgesia ...
- Hemoderivados
- Extracción sanguínea

NO compatible con NP(*) Total.
NO recomendable con NP Periférica.
NO compatible con drogas vasopresoras.
NO compatible con irritantes y vesicantes.

(*) NPP: nutrición parenteral periférica
NP: nutrición parenteral

Manejo y cuidados de PICCs y líneas medias (midline)

Mantenimiento intraluminal	Cura	Cambio de Sistemas
<p><u>LAVADO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Usar jeringas 10cc o mayores. • Lavar con 10ml SSF (20ml tras hemoderivados, extracción de sangre o infusión lipídica). • Técnica push-stop: (bolos de 1-2 ml continuados + clampado a presión positiva en la última embolada). 	<ul style="list-style-type: none"> • Técnica estéril y mascarilla. • Antiséptico de elección: 1ª elección: Clorhexidina 2% en alcohol isopropílico 70% 2ª elección: Povidona yodada acuosa /alcohol isopropílico 70% • Cambio de apósito: - 1º cambio a las 24h post inserción. - Sigüientes cambios: - Apósito de gasa c/48h. - transparente → c/7 días. 	<ul style="list-style-type: none"> • Soluciones acuosas → c/7 días • Soluciones lipídicas (excepto NP) c/12h • NP: c/24h • Hemoderivados → c/4h • Siempre que exista suciedad o coágulos.
<p><u>USO INTERMITENTE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavar antes y después de cada uso con SSF. • Clampado final manteniendo presión positiva. • Opcional: sellado con heparina. <p><u>USO CONTÍNUO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavar cada 24h con SSF. • Si NP → al cambiar sistema. 	<p>Dispositivo de sujeción</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subcutáneo: no precisa cambio. • Adhesivo: Cambiar cuando precise. Aplicar polímero protector cutáneo. Rotar zona de pegado. 	<p>Tapones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desinfectar antes de cada uso • Cambio → c/7 días o si restos, coágulos...
		<p>Extracción de sangre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parar infusiones 2-3 minutos antes. • Desechar 3-6ml de sangre. • Realizar extracción. • Lavado con 20 ml SSF push-stop.
<p>OBSTRUCCIÓN: ¡¡¡ NO FORZAR INFUSIÓN !!! Realizar técnica de vacío con llave de 3 pasos Solución de urokinasa según protocolo del centro.</p>		